



Évolution de l'innovation!

www.thebetteroxygenmask.com



Un masque Oxy2Mask™ remplace plusieurs appareils traditionnels d'oxygénothérapie

Efficacité des cliniciens Réduction des stocks Réduction des déchets médicaux Réduction de la consommation d'oxygène

Sécurité du patient

- Réduit le risque de réinspiration de CO2
- Réduit le risque d'aspiration des vomissements
- Convient à la respiration par le nez ou la bouche

Confort du patient

- Aucune accumulation de chaleur ou d'humidité
- Réduit les sentiments de claustrophobie
- Communication non obstruée
- Accès pour les fluides et médicaments
- oraux



Oxy₂Mask™



Changer la donne avec des tourbillons fixes haute vélocité

- La nouvelle conception du masque Oxy2Mask fixe le disque champignon directement à la paroi du diffuseur afin d'agir comme un déflecteur. Le masque est également doté d'orifices aérodynamiques stratégiquement placés qui dirigent les tourbillons fixes d'oxygène à une vitesse accrue vers le nez et la bouche du patient.

Rendement fiable



- Le débit renommé du masque Oxy2Mask a évolué, continuant à offrir une vaste plage de taux d'oxygène inspiré allant de 24 % à 90 %.

Chaîne d'approvisionnement nord-américaine fiable


- La nouvelle conception inclut un assemblage à enclenchement et des matériaux issus de sources locales, ce qui permet une disponibilité constante des produits.

Caractéristiques techniques

- Fournit des débits d'oxygène allant de 1 à plus de 15 litres à la minute (haut débit), un taux d'oxygène inspiré de 24 % à 90 % (masque pour nourrissons 1/4 à plus de 5 litres, taux d'oxygène inspiré de 22 % à 65 %)
- Exempt de latex de caoutchouc naturel et de phtalates comme le DEHP
- Adaptateur pivotant sur 360°
- 25 masques/boîte
- Quatre tailles offertes :
 - Adulte
 - Plus (Masque 25 % plus grand)
 - Enfant (3 à 10 ans, 15 à 32 kg / 33 à 70 lb)
 - Nourrisson (6 mois à 3 ans, 7 à 15 kg / 16 à 33 lb)

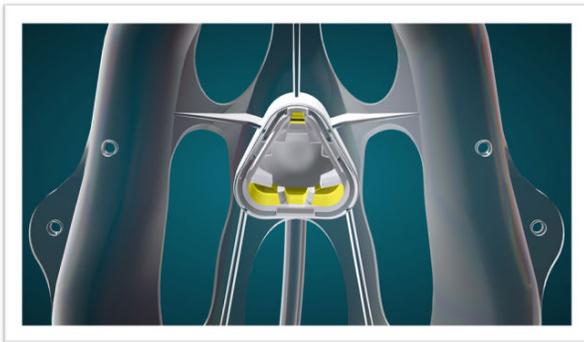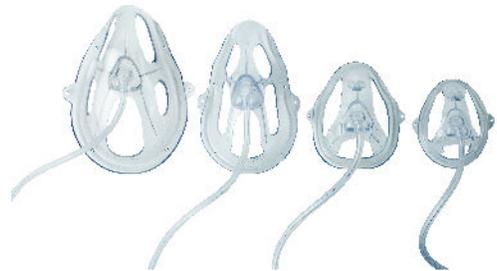

Masque Oxy2Mask avec diffuseur intégré et orifices directionnels

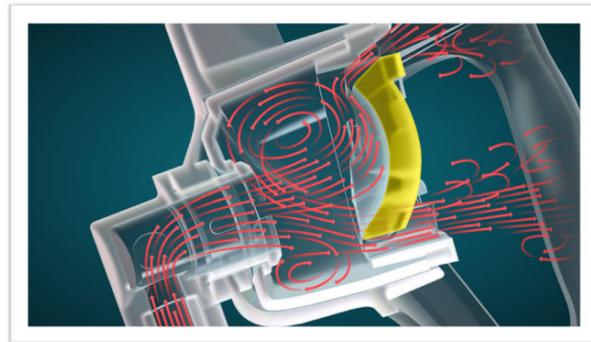

Profil latéral de la dynamique du débit d'oxygène à travers les orifices directionnels vers la bouche et le nez (déflecteur mis en évidence).

Code	Description	Taille du masque	Longueur de la tubulure	Élastique
OM-1125-8	Tube de 7 pi pour masque d'adulte Oxy2Mask™	Adulte	7'	Simple
OP-1125-8	Tube de 7 pi pour masque Oxy2Mask™ Plus	Plus	7'	Simple
OK-1125-8	Tube de 7 pi pour masque d'enfant Oxy2Mask™	Enfant	7'	Simple
OT-1025-8	Tube de 7 pi pour masque de nourrisson Oxy2Mask™	Nourrisson	7'	Simple

* Autres variantes et options exemptes de PVC offertes



Fabriqué par:
Southmedic Inc.
50 boul. Alliance,
Barrie, ON Canada L4M 5K3
www.thebetteroxygenmask.com

Courriel: custserv@southmedic.com
1-800-463-7146
1-705-726-9383

ISO 13485

PO261 Sept. 2023

